

# DSP *diamond*

**POLISHING**




EN | ENGLISH

PT | PORTUGUÊS

ES | ESPAÑOL

DSP  
*white*

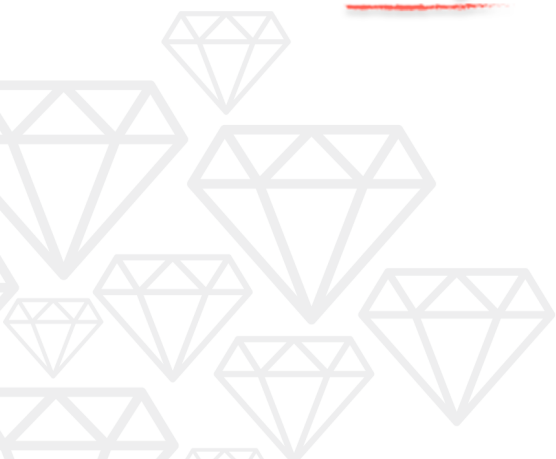

# DSP diamond

**POLISHING**

**ENGLISH**

To access the IFU go to  
dspbiomedical.com/ifu  
with code: 0.1000



**TRADE NAME:** DSP Diamond Polishing  
**TECHNICAL NAME:** Dental Prophylaxis and Polishing Pastes

Please read all information of this instruction for use carefully before applying the product.

**INSTRUCTIONS FOR USE**  
**PROFESSIONAL USE ONLY**

Keep for consultation until the total consumption of the product.  
Keep this instruction until there is no more interaction of the product with your patient.

**CONTENT:**  
• 1 syringe with 2g DSP Diamond Polishing – 2-4 microns; 2 applicator tips;  
• 1 instruction manual for the professional.

**PRODUCT DESCRIPTION:**  
DSP Diamond Polishing is a universal polishing paste produced with micronized diamond of extra-fine granulation (2 to 4 microns), for use exclusively by dentists or prosthetics. The product offers excellent result in the polishing and shine of porcelain, dental enamel, resins, composites and other restorative materials.

Its formulation was developed for exclusive use in a dental clinic and contains a medium of the paste composed of water-soluble ingredients that provides ease in lubrication during the polishing process and does not suffer from the action of heat. It has medium viscosity that facilitates at the time of polishing.

**PRODUCT INDICATION:**  
DSP Diamond Polishing is indicated for use in conjunction with felt discs or velvety discs, which enhances its action in polishing and finishing surfaces of restorative materials in general.

**COMPOSITION:**  
Micronized diamond powder, lubricating medium, thickeners and aroma.

**INSTRUCTIONS FOR USE:**  
**1st step**  
Prepare the area to be polished, if necessary use with the aid of sandpaper discs or medium granulation paste, leaving it a smooth tooth surface and in the desired shape.  
**2nd step**  
Fit the felt disc to the end of the mandrel. Dispense the paste onto the disc or directly onto the tooth or restorative material. Apply the product at a low speed, exerting slight pressure, with intermittent touches using a circular motion.  
**3rd step**  
If necessary, repeat the procedure in step 2, to obtain the desired effect.

**PRECAUTIONS AND CONTRAINDICATIONS:**  
Use low speed, exerting slight pressure on the felt discs, with intermittent touches using a circular motion. To avoid excessive heating of the dental surface.  
During application of the product it is recommended to wear safety glasses by the professional.  
Do not use in patients with any sensitivity to the components of this product.  
Discontinue use of the product in case of allergic reactions.

**CONSERVATION AND STORAGE:**  
• Keep the product in its packaging always closed.  
• Protect from the incidence of direct sunlight.  
• Store the product at temperatures from 0°C to 30°C.  
• If they find malfunctions, request the replacement of the material.

**DATE OF MANUFACTURE:** PACKING  
**EXPIRATION DATE:** 2 YEARS AFTER THE DATE OF MANUFACTURE.

**WARNING:**  
Respect the expiration date. Never use the product if it has expired. Keep out of reach of children. For dental use only. Before using observe the appearance of the product, if you notice any anomalies, contact the manufacturer or a professional immediately. The manufacturer is not responsible for damages caused by other uses or by incorrect handling. This material has been manufactured for dental use only and must be handled according to the instructions for use. It is the responsibility of the user to prove, before the use of this product, that this material is compatible and suitable for the desired use, especially when this use is not indicated in these instructions for use. Data descriptions do not constitute any kind of guarantee and, therefore, do not have any link. Do not reuse empty packages. Do not reuse empty packaging for other purposes. To dispose of the product, follow local legislation.

**MANUFACTURED AND DISTRIBUTED BY:**  
FABRICADO E DISTRIBUIDO POR:  
FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR:



DSP Industrial LTDA  
CNPJ: 03.960.018/0001-23

Rua Marechal Floriano Peixoto, 303  
Ouro Verde II – Campo Largo – PR  
83.606-290 – SAC 0800.600.88.66  
Resp. Téc.: Célio G. Netzel  
CREA-PR: 25412/D  
Registro Anvisa: 80116980019  
PARA COMPRAS, DÚVIDAS, ELOGIOS E  
RECLAMAÇÕES: 0800 600 8866

**REF**

Code of Product  
Código do Produto  
Código de Producto



Do not reuse  
Não Reutilizar  
No reutilizar

**LOT**

Number of the lot  
Número do Lote  
Número del lote



Do not use  
if the package  
it's damaged  
Não Utilizar  
se a Embalagem  
No utilize  
si el empaque  
esta dañado



Manufacturer  
Fabricante  
Fabricante



Date of  
manufacturing  
Data de Fabricação  
Fecha fabricación



Keep Dry  
Conservar seco  
Mantener seco

**EC REP**

Representative  
in the community  
european  
Representante na  
Comunidade Europeia  
Representante  
en la comunidad  
europea



Keep away from light  
Manter afastado da luz  
Mantener alejado de la luz

**PROIBIDO REPROCESSAR**

Prohibited  
Reprocess  
Proibido  
Reprocessar  
Prohibido  
reprocessar

**Rx Only**

Notification demanded by  
FDA for Business in the USA.  
Notificação exigida pela  
FDA para Comercio  
nos EUA.  
Notificación exigida por  
FDA para Negocio En EUA.



Date of Durability  
Minimum  
Data de Durabilidade  
Mínima  
Fecha Durabilidad  
Mínimo



Reference to information  
join or attached  
Referência a informação  
junta ou anexa  
Referencia a informacion  
unirse o adjunto

# DSP diamond

**POLISHING**



DSP Biomedical Group

# DSP diamond

POLISHING

PORTUGUÊS

Para acessar a IFU acesse  
dspbiomedical.com/ifu  
com o código: 0.1000

NOME COMERCIAL: DSP Diamond Polishing  
NOME TÉCNICO: Pastas Para Profilaxia e Polimento Dental

Leia com atenção todas as informações desta instrução de uso antes de aplicar o produto.

INTRUÇÕES DE USO  
SOMENTE USO PROFISSIONAL

Guarde para consulta até o consumo total do produto.  
Guarde esta instrução até não haver mais interação do produto com o seu paciente.

CONTEÚDO:  
• 1 seringa com 2g DSP Diamond Polishing – 2-4 microns; 2 ponteiros aplicadoras;  
• 1 manual de instruções para o profissional.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:  
DSP Diamond Polishing é uma pasta de polimento universal produzida com diamante micronizado de granulação extrafina (2 a 4 microns), para uso exclusivamente de dentistas ou protéticos. O produto oferece excelente resultado no polimento e brilho de porcelana, esmalte dental, resinas, compósitos e outros materiais restauradores. Sua formulação foi desenvolvida para uso exclusivo em consultório odontológico e contém um veículo da pasta, composto por ingredientes hidrossolúveis que proporciona facilidade na lubrificação durante o processo de polimento e não sofre com ação do calor. Apresenta viscosidade média que facilita na hora do polimento.

INDICAÇÃO DO PRODUTO:  
DSP Diamond Polishing é indicada para ser utilizada em conjunto com discos de feltro ou discos aveludados, o que potencializa sua ação no polimento e acabamento em superfícies de materiais restauradores em geral.

COMPOSIÇÃO:  
Pó de diamante micronizado, veículo lubrificante, espessantes e aroma.

INSTRUÇÕES DE USO:  
1º Passo  
Prepare a região a ser polida, se necessário utilize com auxílio de discos de lixa ou pasta de granulação média, deixando-a superfície dental lisa e no formato desejado.  
2º Passo  
Encaixe o disco de feltro na extremidade do mandril. Dispense a pasta sobre o disco, ou diretamente sobre o dente ou material restaurador. Aplique o produto em rotação baixa, exercendo pouca pressão, com toques intermitentes e em movimentos circulares.  
3º Passo  
Caso seja necessário, repita o procedimento do passo 2, para obter o efeito desejado.

PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES:  
Utilize rotação baixa, exercendo pouca pressão sobre os discos de feltro, com toques intermitentes e em movimentos circulares. Para evitar o aquecimento excessivo da superfície dental.  
Durante a aplicação do produto é recomendada a utilização de óculos de segurança pelo profissional.  
Não utilizar em pacientes com qualquer sensibilidade aos componentes deste produto.  
Suspender o uso do produto em caso de reações alérgicas.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO:  
• Manter o produto em sua embalagem sempre fechada.  
• Proteger da incidência da luz solar direta.  
• Armazene o produto em temperaturas de 0°C a 30°C.  
• Caso constatem avarias solicite a troca do material.

DATA DE FABRICAÇÃO: VIDE EMBALAGEM  
PRAZO DE VALIDADE: 2 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO.

ADVERTÊNCIA:  
Respeite o prazo de validade. Nunca utilize o produto se estiver com o prazo de validade expirado. Mantenha fora do alcance das crianças. Somente para uso odontológico. Antes de utilizar observe o aspecto do produto, caso observe alguma anomalia, entre em contato imediatamente com o fabricante ou com um profissional. O fabricante não é responsável por danos causados por outros usos ou por manipulação incorreta. Este material foi fabricado somente para uso dental e deve ser manipulado de acordo com as instruções de uso. É de responsabilidade do usuário a comprovar, antes do emprego deste produto, se este material é compatível e adequado com a utilização desejada, principalmente quando esta utilização não está indicada nestas instruções de uso. Descrições de dados não constituem nenhum tipo de garantia e, por isto, não possuem qualquer vinculação. Não reutilizar a embalagem vazia. Não reutilizar a embalagem vazia para outros fins. Para realizar o descarte do produto siga a legislação local.

MANUFACTURED AND DISTRIBUTED BY:  
FABRICADO E DISTRIBUIDO POR:  
FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR:

DSP Industrial LTDA  
CNPJ: 03.960.018/0001-23

Rua Marechal Floriano Peixoto, 303  
Ouro Verde II - Campo Largo - PR  
83.606-290 - SAC 0800.600.88.66  
Resp. Téc.: Célio G. Netzel  
CREA-PR: 25412/D  
Registro Anvisa: 80116980019  
PARA COMPRAS, DÚVIDAS, ELOGIOS E  
RECLAMAÇÕES: 0800 600 8866

REF	Code of Product Código do Produto Código de Producto		Do not reuse Não Reutilizar No reutilizar
LOT	Number of the lot Número do Lote Número del lote		Do not use if the package it's damaged Não Utilizar se a Embalagem se a embalagem está dançada
	Manufacturer Fabricante Fabricante		Keep Dry Conservar seco Mantener seco
	Date of manufacturing Data de Fabricação Fecha fabricación		Keep away from light Manter afastada da luz Mantener alejado de la luz
EC REP	Representative in the community european Representante na Comunidade Europeia Representante en la comunidad europea		Notification demanded by FDA for Business in the USA. Notificação Exigida pela FDA para Comercio nos EUA. Notificación exigida por FDA para Negocio En EUA.
PROIBIDO REPROCESSAR	Prohibited Reprocess Proibido Reprocesar Prohibido reprocesar		Reference to information join or attached Referência a informação junto ou anexa Referencia a información unirse o adjunto
	Date of Durability Minimum Data de Durabilidade Mínima Fecha Durabilidad Mínimo		

# DSP diamond

POLISHING

DSPwhite DSP Biomedical Group

# DSP diamond

POLISHING

ESPAÑOL

Para acceder a las IFU, vaya a  
dspbiomedical.com/ifu  
con código: 0.1000

NOMBRE COMERCIAL: DSP Diamond Polishing  
NOMBRE TÉCNICO: Pastas para Profilaxia y Pulido Dental

Lea con atención toda la información de esta instrucción de uso antes de aplicar el producto.

INSTRUCCIONES DE USO  
SOLO USO PROFESIONAL

Guarde para consulta hasta el consumo total del producto. Guarde esta instrucción hasta que no tenga más interacción del producto con su paciente.

CONTENIDO:  
• 1 jeringa con 2g DSP Diamond Polishing – 2-4 microns; 2 puntas de aplicador;  
• 1 manual de instrucciones para el profesional y paciente.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:  
DSP Diamond Polishing es una pasta de pulido universal producida con diamante micronizado de grano extrafino (2 a 4 micras), para uso exclusivo de odontólogos o prostodoncistas. El producto ofrece excelentes resultados en el pulido y brillo de porcelana, esmalte dental, resinas, composites y otros materiales restauradores. Su formulación fue desarrollada exclusivamente para su uso en consultorios dentales y contiene un vehículo de pasta compuesto por ingredientes solubles en agua que proporciona una fácil lubricación durante el proceso de pulido y no sufre la acción del calor. Tiene una viscosidad media que facilita el pulido.

INDICACIÓN DEL PRODUCTO:  
DSP Diamond Polishing está indicado para ser utilizado en conjunto con discos de fieltro o discos de terciopelo, lo que potencia su acción en el pulido y acabado de superficies de materiales restauradores en general.

COMPOSICIÓN:  
Polvo de diamante micronizado, vehículo lubricante, espesantes y aroma.

INSTRUCCIONES DE USO:  
1º Paso  
Prepare la región a pulir, si es necesario utilícela con la ayuda de discos de lija o pasta de grano medio, dejando la superficie dental lisa y con la forma deseada.  
2º Paso  
Coloque el disco de fieltro en el extremo del mandril. Dispensar la pasta sobre el disco, o directamente sobre el diente o el material de restauración. Aplicar el producto a baja rotación, ejerciendo poca presión, con toques intermitentes y movimientos circulares.  
3º Paso  
Si es necesario, repita el procedimiento desde el paso 2 para obtener el efecto deseado.

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES:  
Utilice una velocidad baja, ejerciendo poca presión sobre los discos de fieltro, con toques intermitentes y en movimientos circulares. Para evitar un calentamiento excesivo de la superficie dental. Durante la aplicación del producto, se recomienda el uso de gafas de seguridad por parte del profesional. No utilizar en pacientes con sensibilidad a los componentes de este producto. Suspender el uso del producto en caso de reacciones alérgicas.

CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:  
• Mantener el producto en su envase siempre cerrado.  
• Proteger de la incidencia de la luz solar directa  
• Almacene el producto en temperaturas de 0°C a 30°C.  
• Si se constatan averías solicite el cambio del material.










FECHA DE FABRICACIÓN: VER EL ENVASE  
PLAZO DE VALIDEZ: 2 AÑOS DESPUÉS DE LA FECHA DE FABRICACIÓN.

ADVERTENCIA:  
Respete la fecha de validez. No utilice nunca el producto si ha vencido. Mantener fuera del alcance de los niños. Sólo para uso odontológico. Antes de utilizarlo, observe el aspecto del producto; si observa alguna anomalía, póngase en contacto con el fabricante o con un profesional inmediatamente. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por otros usos o por una manipulación inadecuada. Este material ha sido fabricado únicamente para uso dental y debe ser manipulado según las instrucciones de uso. Es responsabilidad del usuario comprobar, antes de utilizar este producto, si el material es compatible y adecuado para el uso previsto, especialmente cuando este uso no está indicado en estas instrucciones de uso. Las descripciones de los datos no constituyen ningún tipo de garantía y, por tanto, no son vinculantes. No reutilizar los envases vacíos. No reutilizar los envases vacíos para otros fines. Para realizar el descarte del producto siga la legislación local.

MANUFACTURED AND DISTRIBUTED BY:  
FABRICADO E DISTRIBUIDO POR:  
FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR:

 DSP Industrial LTDA  
CNPJ: 03.960.018/0001-23

Rua Marechal Floriano Peixoto, 303  
Ouro Verde II - Campo Largo - PR  
83.606-290 - SAC 0800.600.88.66  
Resp. Téc.: Célio G. Netzel  
CREA-PR: 25412/D  
Registro Anvisa: 80116980019  
PARA COMPRAS, DÚVIDAS, ELOGIOS E  
RECLAMAÇÕES: 0800 600 8866

<b>REF</b>	Code of Product Código do Produto Código de Producto		Do not reuse Não Reutilizar No reutilizar
<b>LOT</b>	Number of the lot Número do Lote Número del lote		Do not use if the package it's damaged Não Utilizar se a Embalagem está danada No utilize si el empaque está dañado
	Manufacturer Fabricante Fabricante		Keep Dry Conservar seco Mantener seco
	Date of manufac- turing Data de Fabricação Fecha fabricación		Keep away from light Manter afastado da luz Mantener alejado de la luz
<b>EC REP</b>	Representative in the community european Representante na Comunidade Europeia Representante en la comunidad europea		Notification demanded by FDA for Business in the USA. Notificação Exigida pela FDA para Comercio nos EUA. Notificación exigida por FDA para Negocio En EUA.
<b>PROIBIDO REPROCESSAR</b>	Prohibited Reprocess Proibido Reprocessar		Reference to information join or attached Referência a informação junta ou anexa Referencia a información unirse o adjunto
	Date of Durability Minimum Data de Durabilidade Mínima Fecha Durabilidad Mínima		

# DSP diamond

POLISHING

 DSP Biomedical Group